


Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A	COSMETIKIT®	DRY PLATES®	MUGPLUS
CRIOTECA®	CHROMOSALM	DESINFECTEST®	CCCNT
PLAQUIS®	KITPRO-PLUS	CROMOKIT®	MBS
M-IDENT®	SEILAGUA®	SALMOQUICK	AIREANO
NEOGRAM	ENVIROCOUNT		


MICROBIOLOGÍA CLÍNICA CON MICROKIT

MEDIOS DE CULTIVO DESHIDRATADOS MICROKIT® Y CROMOKIT®

(Todos existen también en versiones preparadas en tubos y frascos de larga caducidad)

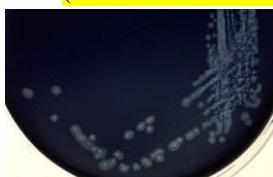

CAMPY SKIRROW AGAR
Campylobacter jejuni

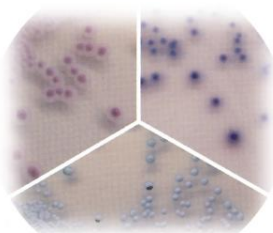


CANDIDA CROMOKIT AGAR
Izq: *Candida krusei*, rosa-morado.
Derecha: *Candida tropicalis*, añil-violeta.
Abajo: *Candida albicans*, azul claro-verdosa



DTM: *Trichophyton mentagrophytes*





SALMONELLA CHROMOSALM AGAR

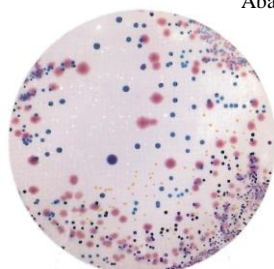

UTI CROMOKIT AGAR: Colonias rosas: *E.coli*
Colonias turquesa: *Enterococos*
Colonias añil: *Enterobacter aerogenes*, *K. pneumoniae*
Colonias gris-blanquecino: *Staphylococcus aureus*
Colonias Crema-marrón: *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*

TCBS *Vibrio cholerae*

CIN *Yersinia enterocolitica*

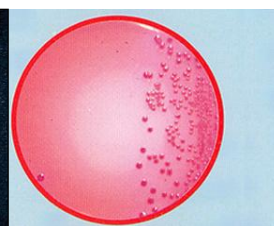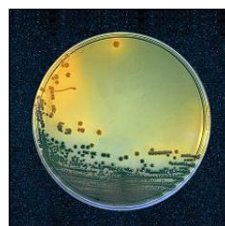

NEW: Tubos de medio preparado cromogénico NGBS para *Streptococcus agalactiae*

OTROS MUCHOS MEDIOS DESHIDRATADOS Y PREPARADOS EN TUBO A SU DISPOSICIÓN



MICROBIOLOGIA CLÍNICA-AMBIENTAL



MICROFLOW y **ENVIROCOUNT**: La combinación perfecta para el muestreo microbiano del aire en quirófanos, UVIs, salas de espera... cumpliendo la Norma UNE 100012. MICROFLOW es el equipo más **versátil** para el muestreo de todo tipo de aire, es el único que permite que el usuario elija no sólo el volumen y tiempo de muestreo, sino además el caudal/velocidad de muestreo, lo que optimiza su sensibilidad en cada tipo de aire (sea poco o muy contaminado). La mayor **sensibilidad** de MICROFLOW está avalada por múltiples publicaciones intercolaborativas.



Controle si el agua llega y se mantiene potable en sus grifos, fuentes y dispensadores según R.D. 140/2003. Gracias a **DRINKWATER** KIT no necesitará equipo alguno.

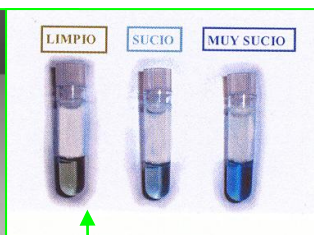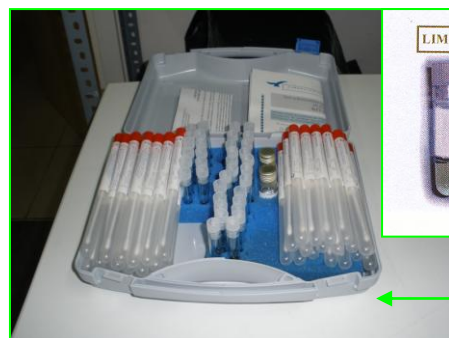

Gracias a **KITPRO** conocerá inmediatamente el nivel de higiene de las superficies de sus cocinas, comedores, salas... por simple cambio del reactivo a color azul



CONSERVACION DE CEPAS: CRIOTECA®

Crioviales con líquido criogénico optimizado para diversos usos y criobolas de porcelana porosa, para mantener ceparios congelados durante años. cad: 1-5-años.

Ventajas: 1-Gama completa de caldos criogénicos optimizados para la máxima duración de diferentes microorganismos, con colores distintivos del tipo de caldo/microorganismo. 2-Tapones herméticos con junta tórica para evitar vertidos accidentales. 3-Tapones altos con rosca interna para mayor seguridad del analista en el manejo de cepas. 4-Elevado número de aros de porcelana porosa (futuros inóculos). 5-Caja de máxima calidad para minimizar el espacio de congelación necesario.



KITS DE IDENTIFICACIÓN/CONFIRMACIÓN



NEOGRAM: Conozca en 20 segundos si la colonia es Gram + o Gram -, sin tener que manchar nada.

RAPIDTEST-UTI: Sepa en sólo 4-8 h, por cambio de color visual, si existe infección urinaria.



Tiras ESTABLES para la Citocromo-oxidasa, caducidad real de 1 año desde fabricación. Distinga de inmediato, por viraje a azul oscuro, las colonias de *Pseudomonas*, *Pasteurella*, *Neisseria*, *Aeromonas*, *Vibrio*, *Brucella*, *Campylobacter*, *Bordetella*, *Moraxella*, *Acinetobacter*, *Agrobacterium*, *Legionella*, *Flavobacterium*, *Achromobacter*, *Micrococcus*, *Alcaligenes*, *Plesiomonas*...



Linterna UVA 366 nm para confirmación de hongos dermatofitos, *Pseudomonas aeruginosa*, *E.coli*, *Salmonella spp*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Legionella pneumophila*, *Desulfovibrio spp*, *Aspergillus aflatoxigénicos*...

LÁTEX para confirmar o serotipar *Campylobacter*, *E.coli* O157, *Legionella*, *Salmonella*, *S.aureus*, *Streptococcus*



- Deseo recibir el catálogo completo MICROKIT de 85 páginas sobre microbiología
- Deseo recibir información técnica sobre:
- Deseo optar a ser su distribuidor en: para los sectores: labs. clínicos
- labs. alimentos labs. aguas labs. cosméticos labs. farmacéuticos otros:

Empresa: _____ Persona: _____

Teléfono: _____ Fax: _____ CIF/NIF/VAT N°: _____

Dirección de envío: _____

Código Postal: _____ Ciudad: _____ País: _____

Dirección e-mail: _____@_____

Productos fabricados en la UE y/o distribuidos por MICROKIT bajo ISO 9001, ISO 11133 y GMPs, revisado en 5-2020