


# KITS M-IDENT®

¡ Son productos exclusivos que sólo encontrará en MICROKIT !

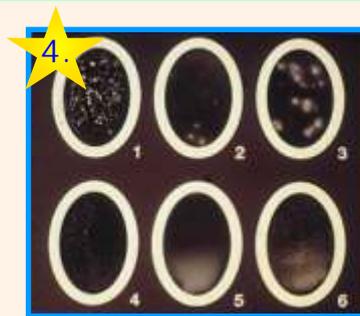

## 1. NEOGRAM:

Olvídese del engorro de la tinción de Gram si sólo necesita saber si la colonia es Gram + o Gram -: Con Neogram sólo necesita 20 segundos y no manchará nada. NEOGRAM altera la pared de las bacterias Gram Negativas, transformando instantáneamente la colonia bacteriana en un filamento muy parecido a la fibrina, visible al ojo humano, en cambio los Gram positivos no reaccionan. Caducidad de más de 1 año.

## 2. Tiras ESTABLES para la Citocromo-Oxidasa:

El test que clásicamente caducaba a las pocas horas de abrirlo por viraje a gris, se ha estabilizado en las cómodas tiras **MICROKIT** hasta alcanzar caducidades de 1 año, sin que el reactivo vire por acción del aire. Neto viraje inmediato de las colonias de microorganismos oxidasa-positivos, del rosa al azul oscuro.

## 3. Kits de confirmación bioquímica M-Ident®

¿Cansado de que se le caduquen las galerías de **identificación**, que además sólo están pensadas para microbiología clínica?

Con la gama **M-Ident®** de **MICROKIT** confirmará los microorganismos que busca siguiendo las Normas ISO que le afectan, sin desperdiciar tiempo y energías en **identificar** colonias que no le interesan y ahorrando el coste de las galerías que se caducan por falta de uso. Nº de test por kit: sólo entre 6 y 10, con caducidad real de 1 año. Gama completa disponible:

- ➔ KMT009 M-IDENT® *Bacillus cereus*, kit de 5 pruebas para confirmar colonias de *B.cereus* s/ISO 7932:1998 (Dextrosa-Polimixina, VP, Nitratos y Movilidad)
- ➔ KMT008 M-IDENT®-*Cl. perfringens*, kit de tubos para la confirmación de colonias sospechosas de *Cl.perfringens* s/ISO/CD 6461-2:2002 (aguas) y FDA (alimentos): Movilidad, reducción de nitrato a nitrito, acidificación de lactosa y licuefacción de la gelatina.
- ➔ KMT010 M-IDENT®-*E.coli*, confirmación de colonias desde Tergitol TTC u otros medios, s/ISOs 16649 y 9308 mediante TBX e Indol-Triptófano
- ➔ KMT012 M-IDENT® *Listeria monocytogenes*, Rhamnosa/Xylosa, confirma s/ISO 11290 colonias desde Agar Ottaviani & Agosti (Chromocytogenes).
- ➔ KMT014 M-IDENT® *Pseudomonas aeruginosa*, kit de tubos para confirmar colonias de *Ps. aeruginosa* según UNE 12780-2003: Citocromo-Oxidasa, Acetamida-Nessler y King B

## 4. Kits de confirmación inmunológica M-Ident®-látex:

De la colonia a la confirmación en sólo 1 minuto!!!

- ➔ KWD055 M-IDENT® **ESTREPTOCOCOS**. KIT LÁTEX serogrupaje LANDCEFIELD (A,B,C,D,F,G). Los Enterococos son estreptococos fecales del Grupo D. Cad: 6-12 meses
- ➔ KMB301 M-IDENT® **LEGIONELLA** LATEX, KIT completo látex para confirmación y serogrupado (*L. pneumophila* serogrupos 1 y 2-15). Cad: 3-12 meses
- ➔ KMB501 M-IDENT®-**SALMONELLA**, látex para screening de Salmonella en caldo de enriquecimiento (SS, Rappaport, Selenito, Tetracionato MK...) sin necesidad de aparatado, en 1 minuto; y para confirmar colonias. Cad. 4-18 meses 100% de sensibilidad, tanto en colonias como en caldos de enriquecimiento selectivo.
- ➔ KWD094 M-IDENT®-**STAPH**: Coagulasa-Látex *Staphylococcus aureus* el más sensible y específico.